




FICHA TÉCNICA

Extractor De Leche Eléctrico. Sacaleche Portátil 3 Modos. Bomba De Leche Manos Libres 40–300 MmHg, Batería 1200 Mah Usb Tipo C.

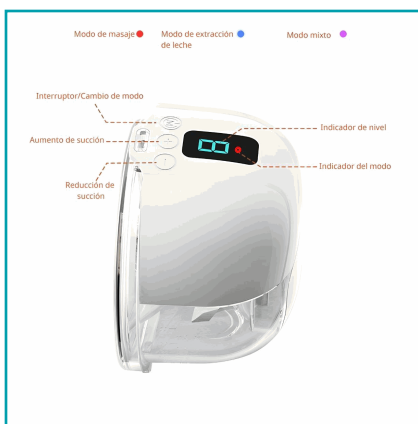

CÓDIGO:
LT573

***Nombre:** Extractor de Leche Eléctrico

Código de Barras: 7450065473623

Código de producto: LT573

Procedencia: Importado

INFORMACIÓN ADICIONAL

Extractor De Leche Eléctrico. Sacaleche Portátil 3 Modos. Bomba De Leche Manos Libres 40–300 MmHg, Batería 1200 Mah Usb Tipo C.

- Extractor De Leche Eléctrico Portátil Manos Libres, Ideal Para Mamás Modernas Que Buscan Comodidad Y Eficiencia.
- Diseño Ergonómico Con Gran Ángulo De Succión De 110° Que Mejora La Adherencia Y Facilita La Extracción De Leche Posterior Rica En Nutrientes.
- Tres Modos De Funcionamiento: Masaje, Extracción Y Modo Mixto, Cada Uno Con 9 Niveles Ajustables.
- Succión Suave Y Eficiente Con Presión Negativa Ajustable De 40 A 300 MmHg.
- Batería De Litio Polímero Recargable De 1200 Mah, Con Hasta 2 Horas De Uso Continuo.
- Carga Rápida Mediante Puerto Usb Tipo C, Compatible Con Cargadores, Power Banks Y Computadoras.
- Pantalla Led Que Muestra Claramente El Modo Seleccionado Y El Nivel De Succión.
- Funcionamiento Silencioso Y Delicado, Ideal Para Uso En Casa, Oficina O Viajes.
- Copa De Silicona Suave, Segura Y Cómoda, Con Diámetro Interno De 24 Mm.
- Capacidad De 180 Ml, Perfecta Para Sesiones De Extracción Individuales.
- Diseño Compacto Y Ligero, Con Peso Aproximado De 0.48 Kg.
- Fácil De Armar, Desmontar Y Limpiar.
- Modelo Rh668, Presentado En Caja A Color De 18 X 15 X 10 Cm.




EXTRACTOR DE LECHE



Batería de litio de gran capacidad de 1200 mAh.

Carga completa en 2 horas.


5-6 succiones/extracciones de leche, 9 niveles/marchas.

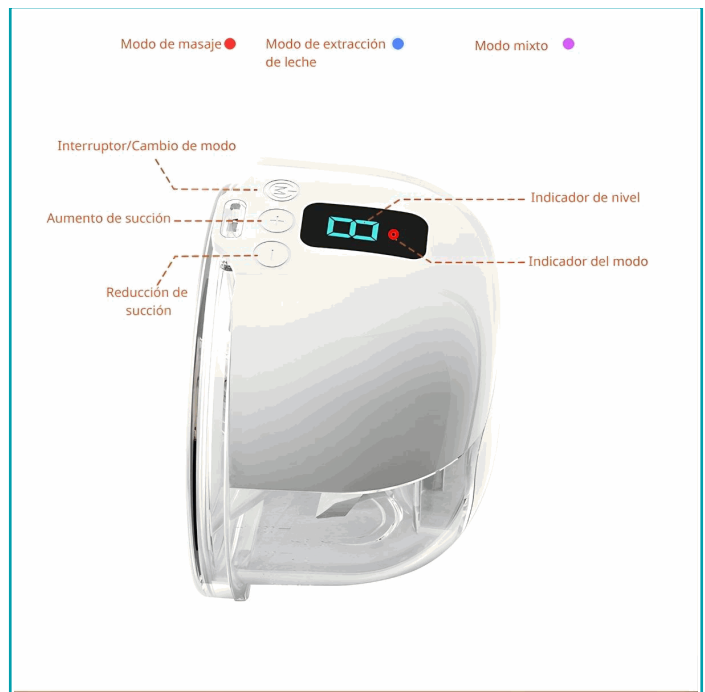

Modo de masaje ● Modo de extracción de leche ● Modo mixto ●

Interruptor/Cambio de modo
Aumento de succión
Reducción de succión
Indicador de nivel
Indicador del modo


Modo de uso de las bandas de ajuste del sujetador

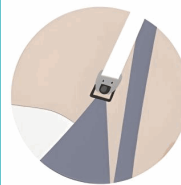

1. Primero, enganche el gancho en la correa del hombro.



2. Luego, enganche el gancho al sujetador.

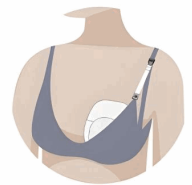

3. Luego, inserte el extractor de leche en el sujetador y ajústelo hasta que quede bien.

Información del producto

